

Protocol reiniging tracheacanules

In deze instructie leggen we stap voor stap uit hoe u uw tracheacanule op de juiste manier reinigt en onderhoudt. Tevens komen de benodigde producten aan de orde.



Belangrijk

Neem voldoende tijd en ga zorgvuldig te werk bij het plaatsen en verwijderen van een binnencanule. Lees ook altijd de gebruiksaanwijzing van uw canule (vraag deze mee na de plaatsing in het ziekenhuis). Neem bij vragen of onduidelijkheden direct contact met ons op, wij helpen graag verder.


Let op

Verwijder nooit de buitencanule zonder uitvoerig overleg met uw behandeld arts of verpleegkundige. Buitencanules worden in principe alleen gewisseld door een arts, verpleegkundige of andere medisch hulpverlener. De buitencanule is de canule die u vastmaakt met een canuleband.

Buitencanule:



Binnencanule:

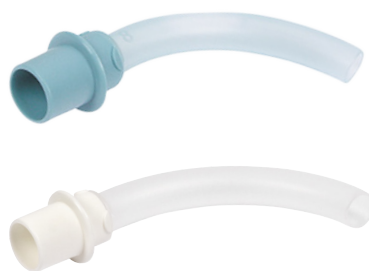

Het is uiterst belangrijk dat de binnencanule eerst verwijderd wordt uit de buitencanule voordat u met de reiniging start. De binnencanule mag niet gereinigd worden als deze zich nog in de tracheostoma bevindt. Zorg dat er zo snel mogelijk een (andere of tijdelijke) binnencanule teruggeplaatst wordt nadat u een binnencanule heeft verwijderd. Zo kunt u rustig de tijd nemen om uw binnencanule te reinigen.

Gebruik hiervoor alleen binnencanules die tot dezelfde canuleset behoren.

Het reinigingsproces




Reiniging van de binnencanule is nodig wanneer secretie en/of slijm zich ophoopt in de binnencanule en u deze niet kunt verwijderen door te hoesten. De eerste stap voor reiniging is het uitnemen van de binnencanule.


Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een binnencanule met spreekklep is het belangrijk dat de spreekklep eerst verwijderd wordt voordat men aan de reiniging begint. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van HME-cassettes, dienen deze ook eerst verwijderd te worden voordat men begint met het reinigen van de binnencanule.

Het is verstandig de binnencanule regelmatig te verwijderen, schoon te maken en te controleren of deze nog juist functioneert.

1. Reinigingsproducten

Wij adviseren bij het reinigen van de een tracheacanule om gebruik te maken van de **Optibrush® SET (REF: 31011)** deze set bevat een aantal basisproducten die nodig zijn om uw binnencanule(s) schoon te maken.

Inhoud Optibrush® SET			
REF	Omschrijving	Eigenschap	Afbeelding
31110	Optibrush® CLEAN	Canulereinigingspoeder waarmee u de canule schoonmaakt.	
31200	Optibrush® CONT	In deze container bevindt zich o.a. een zeef, waarin u de canules na het inweken in het water met het canule- reinigingspoeder weer eenvoudig naar boven kunt halen. In dit bakje kunt u tevens de ongebruikte canules na het reinigen en drogen bewaren. (zie afbeelding hieronder).	
31850-08 & 31850-10	Optibrush® Cleaning Brushes	4 stuks canuleborstels voor het reinigen van zowel de binnen- als de buitenkant van de canule. Er zijn 2 stuks van 8mm en 2 stuks van 10mm doorsnede. Dit zijn de meest gebruikte maten. Uiteraard zijn de borstels ook in andere maten leverbaar.	

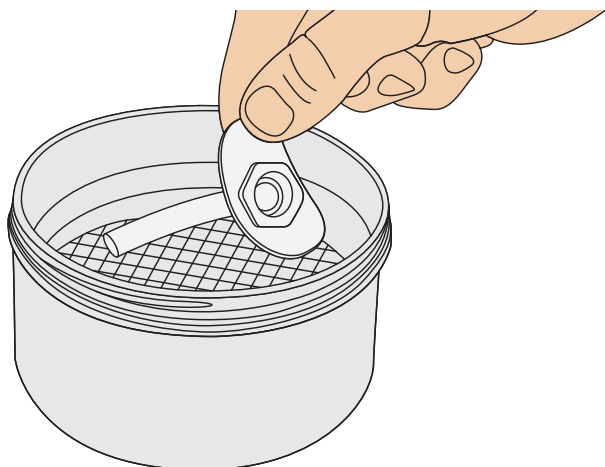

2. Gebruik van een canuleborstel


Gebruik een canuleborstel om de canule zowel van binnen als van buiten te reinigen. Hierbij is het belangrijk dat u de juiste maat borstel gebruikt.

Belangrijk



Buig vóór het borstelen eerst de canuleborstel in de vorm van de canulebocht. (zie afbeelding hiernaast).

Plaats een vinger op het uiteinde van de canule en schuif de borstel voorzichtig vanaf de andere kant in de canulebuis. Beweeg de borstel rustig heen en weer. Uw vinger zorgt ervoor dat de metalen kern van de borstel niet uit het uiteinde van de canule komt en dus geen beschadiging aan de rand kan veroorzaken.

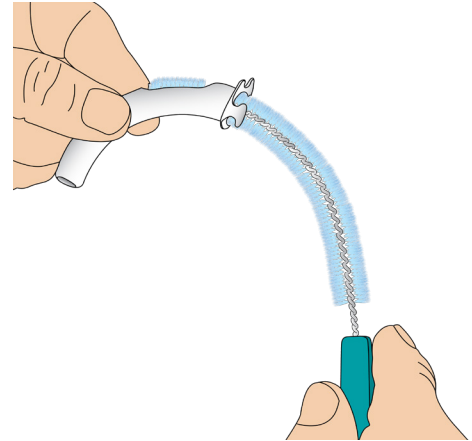Doe vervolgens hetzelfde vanaf de andere kant. Deze werkwijze voorkomt beschadigingen aan de binnenzijde en het uiteinde van de canule en zal de levensduur van uw canule vergroten.



Wij bieden canuleborstels in verschillende uitvoeringen aan, hieronder een overzicht.

Uitvoeringen canuleborstels			
REF	Omschrijving	Maat	Afbeelding
31855	Optibrush® PLUS <ul style="list-style-type: none"> Zachte doch stevige nylon borstelharen. 1 cm brede vezeltop 	5 t/m 14 mm	
31800	Optibrush® BASIC <ul style="list-style-type: none"> Robuuste borstelharen 1 cm brede vezeltop 	6, 8, 10 of 12 mm	
31850	Optibrush® <ul style="list-style-type: none"> Zachte doch stevige nylon borstelharen Zonder vezeltop 	4 t/m 14 mm	

3. Het reinigingsproces doorlopen?

Wanneer het hierboven beschreven reinigingsproces is voltooid, is het belangrijk dat de binnencanules grondig worden afgespoeld onder de kraan met lauw stromend water. Controleer of er geen restanten van schoonmaakmiddelen achterblijven in en op de canule. Deze kunnen irritatie veroorzaken wanneer de canule weer in de buitencanule geplaatst wordt.

4. De canule laten drogen

Laat na de reiniging de canuleonderdelen los van elkaar drogen op een non-woven gaasje. Non-woven gaasjes kunnen wij leveren in 2 verschillende maten:

- 10 x 10 cm.
- 5 x 5 cm.



Wanneer de binnencanules goed gedroogd zijn kunnen deze weer gebruikt worden. De ongebruikte binnencanules kunnen opgeborgen worden. Hiervoor kunt u eventueel de (droge) reinigingscontainer gebruiken.

5. Zilveren canule

Gebruikt u een Labarre zilveren tracheacanule? Dan is het belangrijk dat de canuleset minimaal ieder half jaar gecontroleerd wordt. Deze controles worden uitgevoerd door onze eigen in-house productexpert en technisch specialist Frank.

Bij een dergelijke controle wordt uw canule onderworpen aan een technische inspectie en worden indien nodig kleine reparaties uitgevoerd. Mocht zich een probleem voordoen of er ontstaat schade waarvoor wij niet over de juiste middelen hebben om dit te verhelpen, dan zal dit worden gedaan door de productspecialisten van de fabrikant Labarre. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat alleen specialisten uw canule inspecteren en onderhouden.



Voeg bij verzending van uw zilveren canuleset een MDS onderhoudsformulier in. Mocht u hier niet over beschikken, neem dan contact op met onze customer Service. Tel: 050- 5690038

Let op

- Heeft u meerder canulesets? Houd deze dan strikt gescheiden, iedere set heeft een uniek **MDS serienummer**. Zo voorkomt u dat verschillende canulesets door elkaar raken.
- Uw canule dient **volledig gereinigd en droog** te zijn voordat deze opgestuurd wordt.
- Patiënten die de **MRSA-bacterie** dragen kunnen in verband met besmettingsgevaar de canule uitsluitend opsturen voor onderhoud indien de canule door het ziekenhuis is gesteriliseerd en een decontaminatieverklaring is bijgevoegd.